

A hand is shown holding a glowing, futuristic barcode. The barcode is composed of vertical lines of varying heights, and below it, the numbers 524, 65846, 222, and 64 are displayed in a glowing, white font. The background is a dark blue gradient with a subtle grid pattern.

524 | 65846 | 222 | 64

**Barcode-Add-on für
S!MPATI[®] und Windows.**
Smartes Scannen mit System.

Ihr perfekter Batch-Prozess: mit SIMPATI Barcode-Add-on für vötschoven.



Bewährt. Kompatibel. SIMPATI.

Unsere Steuerungs- und Dokumentations-Software SIMPATI ist bereit für die Anforderungen der Industrie 4.0. Maximale Flexibilität und optimale Vernetzbarkeit, einfachste Bedienbarkeit und höchste Zuverlässigkeit garantieren jederzeit die problemlose Integration in automatisierte Prozesse.

Mit dem Barcode-Add-on für SIMPATI und Windows 10/11 bieten wir Ihnen jetzt die perfekte Erweiterung zur einfachen, benutzerfreundlichen Chargendokumentation und Programmverwaltung.

Machen Sie Ihre vötschoven Geräte fit für die Zukunft!

So funktioniert's:

Basis ist das bei Ihnen installierte SIMPATI, das um eine Eingabemaske zur Datenerfassung mittels Barcode-Scanner erweitert wird. Dieser Scanner ist dann direkt mit dem Rechner verbunden und sofort einsatzbereit.

Die Bedienung erfolgt vollständig über den Barcode-Scanner:

1. Einlesen der Anlagen-ID (1-99).
2. Einlesen der Produkt-ID*:
automatische Zuordnung des erforderlichen Programms.
Sobald Materialnummern hinzugefügt werden, erfolgt eine Plausibilitätsprüfung.
3. Programmstart durch Scannen des Start-Barcodes.
4. Archivierung wird automatisch gestartet (Produktcodes werden automatisch in die Bezeichnung übernommen).

*Alternativ: Einlesen der Programmnummer.

Basic, Premium, Custom: Scannen Sie doch, wie Sie wollen!

3 Packages zur Wahl.

Je nach Bedarf bieten wir Ihnen aufeinander aufbauende Packages. Die Voraussetzungen:

- ▣ Software-Version SIMPATI 4.80
- ▣ Vorhandenes Code-System:
Beispielcodes daraus werden zur Konfiguration, Vorbereitung und für Tests vor Auslieferung benötigt, mögliche Codes:
 - 2D-Matrix (QR-Code)
 - Code 128 (Barcode)
- ▣ Serielle Schnittstelle oder USB am mit SIMPATI verbundenen Rechner oder in dessen Netzwerk
- ▣ Windows 10/11

Basic

Unser Einsteiger-Package für Ihren Schnellstart:

- ▣ Maximal 15 Zeichen Batch-/Auftragsnummer
- ▣ Maximal 15 Zeichen Artikelnummer
- ▣ Maximal 10 unterschiedliche Artikelnummern im Ofen
- ▣ Automatische Programmzuordnung gemäß Artikelnummern
- ▣ Automatische Archivierung der Messdaten für die Verarbeitung in SIMPATI (Traceability/grafische Auswertung)
- ▣ Produktcodes im Archivierungsnamen enthalten

Der gewählte Programmablauf wird gestartet und für jeden Prozess ein eigener Datensatz für die Auswertung in SIMPATI erstellt.

Premium

Aufbauend auf Basic erhalten Sie diese zusätzlichen Features:

- ▣ Name des Bedieners im Batch-Report
- ▣ Produktcode
- ▣ Dateiname der Archivierung
- ▣ Datenexport wahlweise im CSV- oder XML-Format
- ▣ Batch-Report als PDF/A
 - Angabe der Prozesskette (Programm-ID, Zeitstempel, Start/Stop)
 - Grafik SIMPATI
 - Liste der Gerätemeldungen/Alarmer

Custom

Sie brauchen es ganz individuell? Unser Software-Consulting-Team entwickelt gemeinsam mit Ihnen eine passgenaue Lösung, die erweiterte Features enthält. Hier ein Beispiel:

- ▣ Barcode-Scanner mit Display
- ▣ Maximal 50 Zeichen Batch-/Auftragsnummer
- ▣ Maximal 50 Zeichen Artikelnummer
- ▣ Maximal 100 unterschiedliche Artikelnummern im Ofen
- ▣ Übertragung in kundenseitige MS SQL Server-Datenbank
- ▣ Rezeptauswahl gemäß gescannter Materialnummer
- ▣ Tabellarische Darstellung der Temperaturen
- ▣ Option i.O./n.i.O. aus Prozessverlauf

Unser Angebot für Sie:

SIMPATI Barcode-Add-on	Basic	Premium	Custom
Einfache Bedienung über Barcode-Scanner	✓	✓	✓
Automatische Programmzuordnung über Produkt-ID	✓	✓	✓
Automatische Archivierung	✓	✓	✓
Produktcodes im Archivierungsnamen	✓	✓	✓
Zeichen Batch-/Auftragsnummer	15	15	50
Zeichen Artikelnummer	15	15	50
Unterschiedliche Artikel pro Charge	10	10	100
Einlesen des Bedieners		✓	✓
Datenexport wahlweise im CSV- oder XML-Format		✓	✓
Automatische Batch-Reports		✓	✓
Übertragung in MS SQL Server-Datenbank			✓
Tabellarische Darstellung der Temperaturen im Batch-Report			✓
Meldung aus der Gerätesteuerung (SPS) (i. O./n. i. O.)			✓
Weitere individuelle Features			✓
Barcode-Scanner inklusive			✓

Unsere Leistungen – jede Menge gute Argumente:

- Globales Service-Netz
- Breites Angebot an vorbeugender Instandhaltung
- Sichere Ersatzteilversorgung
- Jederzeit abrufbare Sondereinsätze
- Fachgerechte Entsorgung Ihrer Altgeräte mit Nachweis

Unsere Service-Experten sind immer in Ihrer Nähe.


24/7-Service-Helpline:
+49 1805 666 556

Weiss Technik GmbH

Wärmetechnik
Greizer Straße 41-49
35447 Reiskirchen/Germany
T +49 6408 84-73
info.ovens@weiss-technik.com
weiss-technik.com



Kontaktieren
Sie uns.

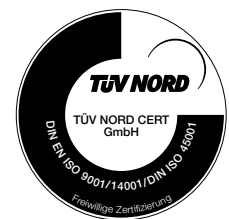

Test it. Heat it. Cool it.